

# Accu-Chek Mobile

## *Transfert de rapports sur PC*

---



Experience what's possible.

ACCUCHEK®

## Etape 1: Brancher Accu-Check Mobile à votre ordinateur



▪ Cet écran vous informe que vous pourrez visualiser directement des rapports sans aucune installation de logiciel au préalable



▪ La connexion est maintenant établie

**ACCU-CHEK®**

## Etape 2: Ouvrir la page de rapport

**Accu-Chek Mobile se comporte comme une clé USB :**

- Allez dans le menu Démarrer de votre ordinateur puis cliquez sur « ordinateur » ou « poste de travail »

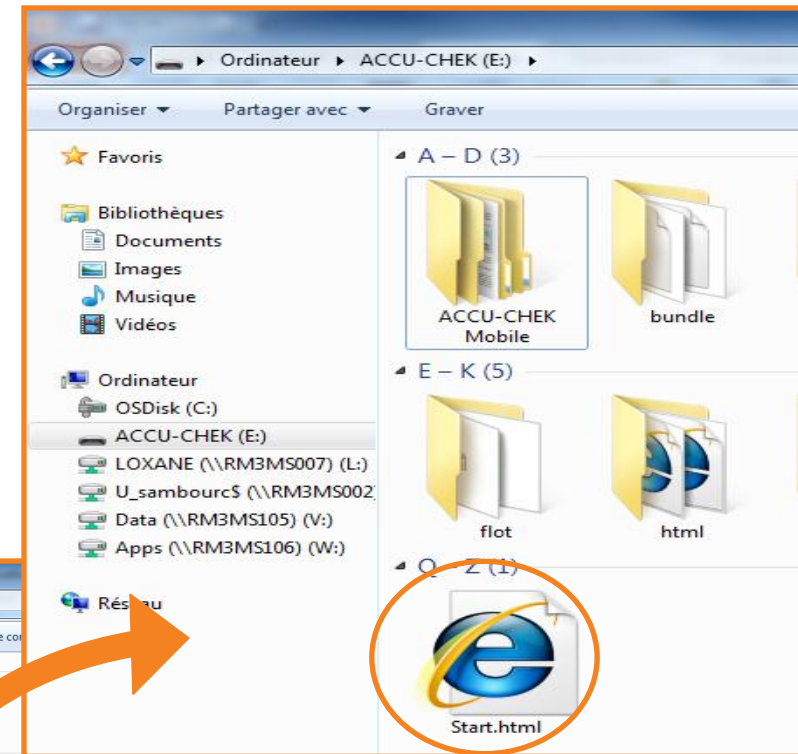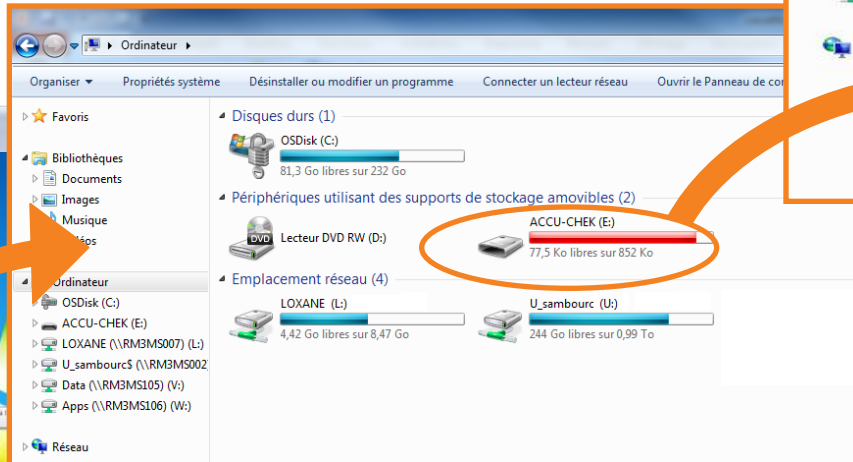

- Double-cliquez sur l'icone de votre navigateur *Start.html*

Pas besoin de connexion internet

- Double-cliquez sur le disque *Accu-Chek*

## Etape 3: Consulter les rapports

Roche

- Double-cliquez sur la barre jaune et choisissez « autoriser »


### 4 rapports sont disponibles:

- Evolution générale
- Journée standard
- Semaine standard
- Liste

**1** Réglage de la période

**2** Bouton d'enregistrement

**3** Objectifs glycémiques du lecteur

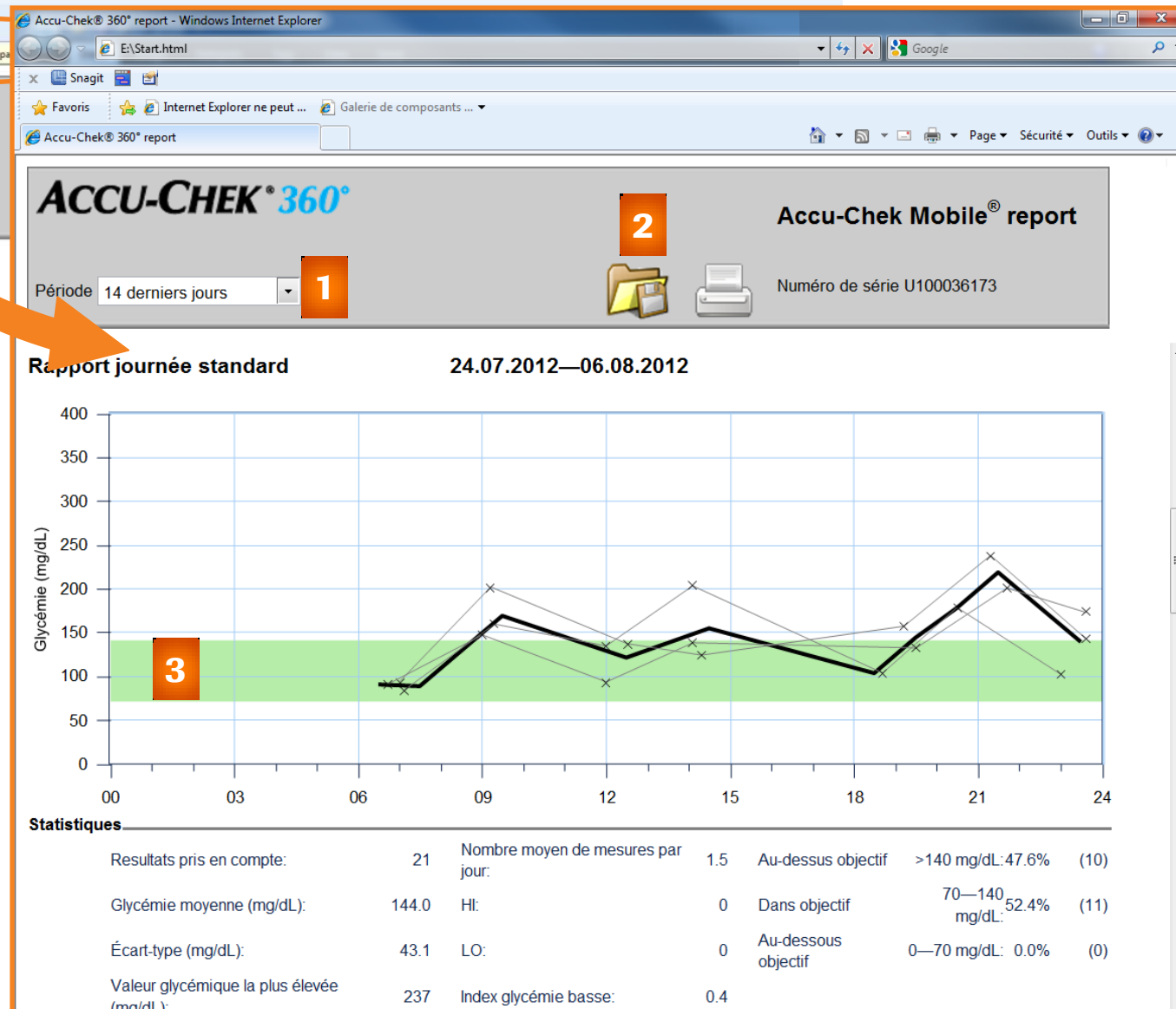

# Le saviez-vous ?




La fonction **Trans. Données** Accu-Chek Mobile permettra de transférer les données aux futures versions de Accu-Chek 360. Les écrans suivants apparaîtront lors du branchement.



- Avec cette fonction, il n'est pas possible de visualiser les rapports sans installation de logiciel

Par défaut, la fonction **Rapports** se met en route lors du branchement de Accu-Chek Mobile à un ordinateur. Si les écrans ci-dessus apparaissent, il faut re-paramétrer Accu Mobile pour qu'il lance la fonction **Rapports**:

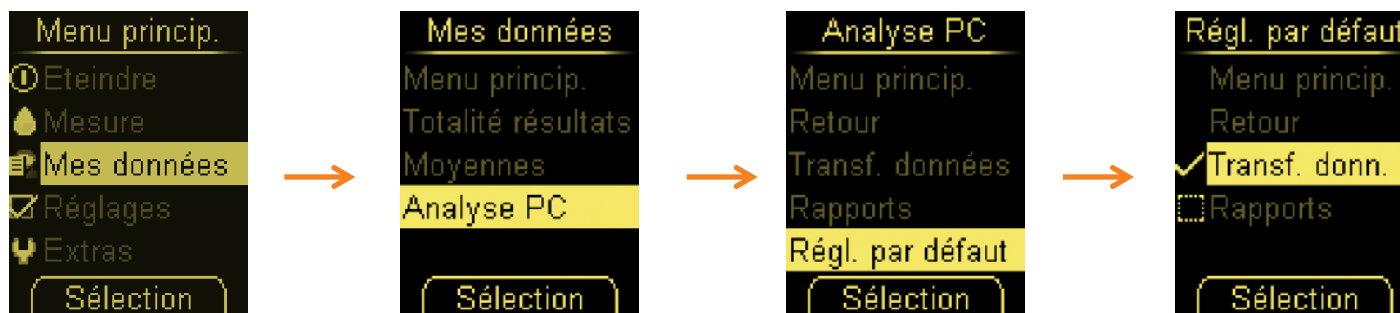

- Surlignez *Rapports* puis sélectionnez

En sélectionnant le menu *Rapports*, le transfert de rapports débutera mais, lors d'un branchement ultérieur, le lecteur conservera la fonction qui se met actuellement en route par défaut

**ACCU-CHEK®**