

Accu-Chek Mobile

La cassette

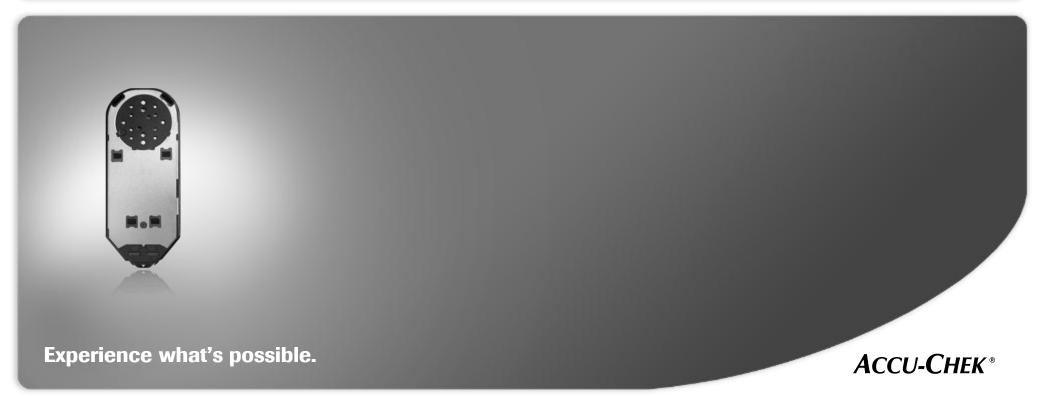


Schéma des 2 compartiments distincts de la cassette




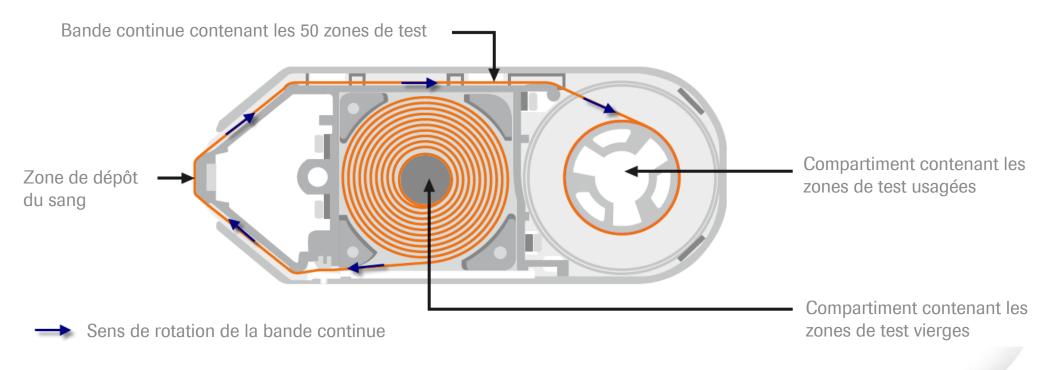


Schéma de la bande continue et de ses 50 zones de test Zone absorbante de Zone hydrophobe recueil du sang Film réactif Bande de support des zones de test Zones de test **ACCU-CHEK®**

La zone de test plus en détail



Zone hydrophobe repoussant le sang qui ne peut donc pas s'écouler en dehors de la zone de test

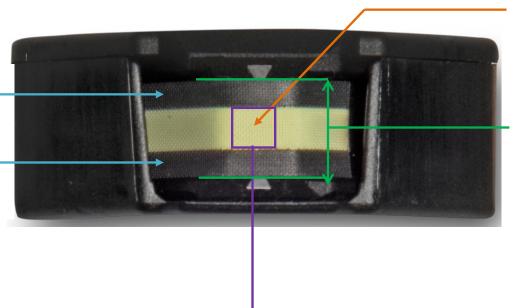

Zone de test

Largeur totale de la bande continue

Fenêtre sous la bande continue destinée à laisser passer le rayon lumineux projeté par la lentille